


Procedimiento Paso a Paso

Una Eficaz Eliminación del Vello a Largo Plazo con el Sistema Ellipse Light

Ellipse
LIGHT

Millones de mujeres y hombres por todo el mundo se enfrentan a una lucha cotidiana por eliminar el vello corporal indeseado. El Ellipse Light es una poderosa herramienta, diseñada para proveer una eliminación del vello a largo plazo. Es un sistema apropiado para la mayoría de los tipos de piel, que puede usarse en cualquier parte del cuerpo.

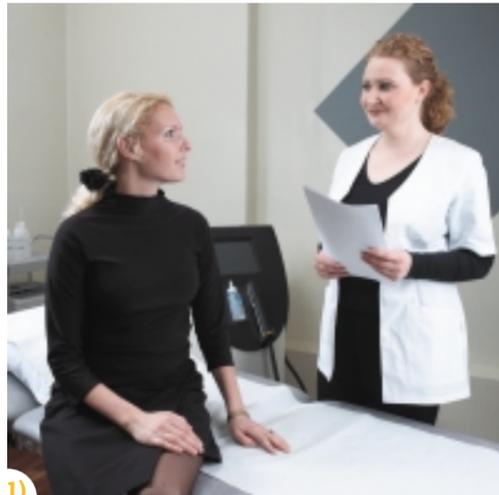

1)

Consulta

Ellipse transmite una luz visible especialmente filtrada a través de la piel, y adentro del vello en crecimiento. El pigmento del vello absorbe la luz, que se convierte en calor, y destruye el folículo piloso sin quemar el tejido circundante.

El tratamiento sólo funciona en el vello en crecimiento, y dado que hay vellos en etapa de reposo, se requiere más de un tratamiento. Esto se explicará en una consulta inicial durante la cual, además, tendrá la oportunidad de hacer cualquier pregunta acerca del tratamiento.



2)

Preparación

Durante los 30 días anteriores al tratamiento, los pacientes deben evitar la exposición de la zona de tratamiento al sol y/o el uso de solarium. Si la exposición es inevitable, use un buen filtro solar (FPS +20). Durante ese período, también es importante no arrancar el vello con cera o pinzas. Puede afeitarse, pero evite hacerlo durante unos pocos días antes del tratamiento, ya que el profesional necesita poder ver el vello.

Cuando se trate del rostro, todo el maquillaje debe ser eliminado de la zona de tratamiento. La zona a ser tratada se marca con un rotulador rojo para establecer el perímetro del tratamiento.




3)

Antes de que pueda comenzar el tratamiento, la zona ha de estar libre de vello. Si fuese necesario, se afeita la zona y se elimina todo el vello afeitado.




4)

Se aplica una capa fina de gel Ellipse por toda la zona de tratamiento. Esto asegura un buen contacto entre el aplicador y la piel, y mejora la eficacia del tratamiento.

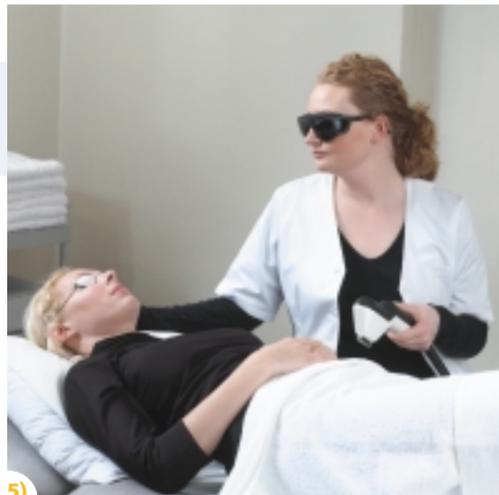


5)

Tanto el profesional como el cliente deben llevar puestas unas gafas de protección durante toda la sesión de tratamiento.

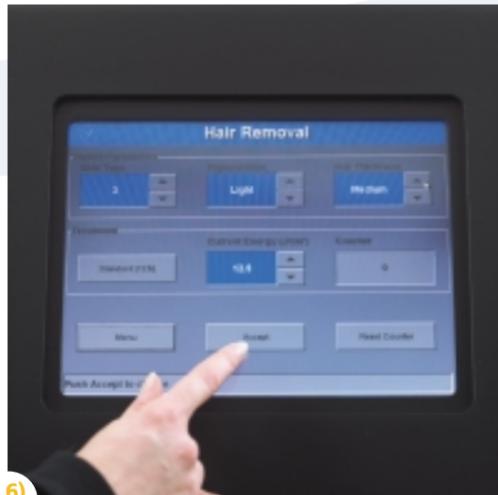


6)

El profesional escoge el tipo de piel, la pigmentación y el grosor del vello del cliente. El Sistema Ellipse Light automáticamente calcula los valores del tratamiento.

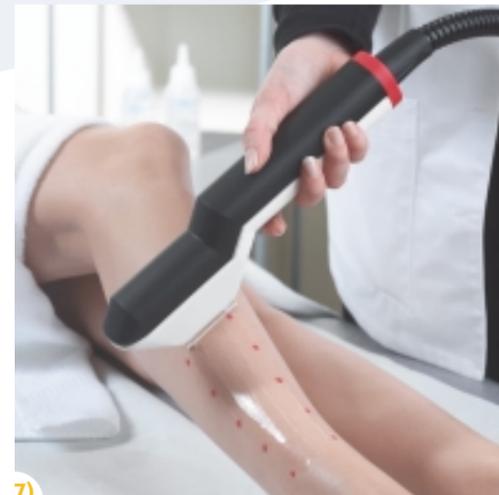

7)

El profesional comienza el tratamiento. Tras los primeros disparos, el profesional verificará la reacción de la piel, y si fuese necesario, ajustará los valores del tratamiento. El paciente normalmente sentirá un escozor muy breve seguido por un período durante el cual la piel se siente tibia.

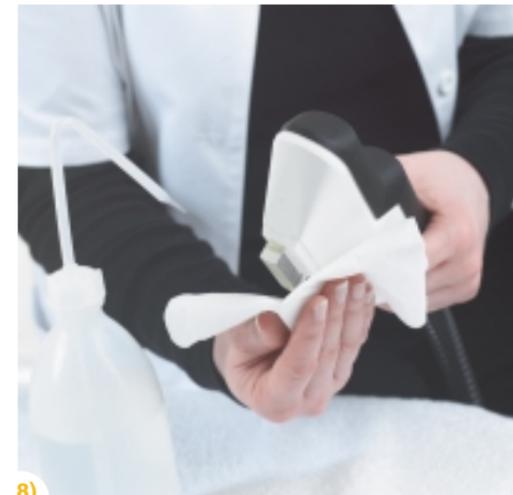

8)

Al concluir el procedimiento, el gel se elimina de la zona de tratamiento, y se limpia el aplicador. El paciente debe evitar exponerse al sol durante los 30 días posteriores al tratamiento, o en su defecto, usar un filtro solar (FPS +20).